

Réveil-matin, modèle Visit

BE1380

 Bellman & Symfon®



Caractéristiques

- 1 Alarme extra forte de 100dB***
Signal par balayage de fréquences croissant
- 2 4 lampes clignotantes de hautes intensités**
Efficace meme en plein jour
- 3 Coussin vibrant puissant**
Vibre et émet un son
- 4 Lampe nocturne**
Vous guide vers le lit
- 5 Pile de secours**
Assure un fonctionnement de toutes ses caractéristiques
- 6 Répétition Intelligente de l'alarme**
Réduit les intervalles entre les alarmes
- 7 Compatible avec Bellman Visit**
Fonctionne comme un récepteur Visit

100 dBA @ 4", 94 dBA @ 12"



Se lever n'a jamais été aussi facile

Avec le Réveil-matin Classic de Bellman & Symfon vous n'avez plus à vous soucier de trop dormir longtemps. Choisissez de vous réveiller à l'aide d'une puissante alarme sonore, quatre lumières clignotantes de hautes intensités ou un coussin vibrant qui vibre sous votre oreiller tout en émettant un son. Parfait pour ceux qui ont du mal à sortir du lit ou ayant des difficultés d'audition. Le Réveil-matin Visit est également relié aux émetteurs du système d'alerte Visit. Cela signifie que vous serez réveillés lorsque la sonnette de porte ou le téléphone sonne, quand votre bébé pleure ou s'il y a un incendie dans la maison.

Le Réveil-matin Visit a de nombreuses caractéristiques uniques, comme la lampe de nuit, une douce lumière bleue qui vous aide à retourner au lit si vous avez à vous lever la nuit et une fonction de répétitions intelligentes qui réduit les intervalles de temps de 9 à 2 minutes. Le signal d'alarme balaye les fréquences de sorte que si vous avez du mal à entendre, par exemple les hautes fréquences, vous ne manquerez pas l'alarme. Il a un grand afficheur LCD avec rétro-éclairage réglable et deux boutons de rotations pour le réglage du temps et de l'alarme. En plus, vous pouvez connecter le réveil à votre téléphone pour amplifier le signal de la

3



sonnerie ou le connecter à un tapis de contact pour porte d'entrée.

Spécifications techniques

Grosueur et poids

Hauteur: **4.3"**, 108 mm

Largeur: **4.7"**, 121 mm

Profondeur: **3.6"**, 92 mm

Poids: **13.7 oz**, 389 g incl. piles



Connexions

- Entrée stereo externe 3.5 mm jack
- Module téléphonique: RJ-11 jack
Réseau analogue: 26-120 V RMS, 15-100 Hz

Signal de sortie

- **Son**
100 dBA @ 4", 10 cm, 94 dBA @ 12", 30 cm
Signal composé de fréquences multiples avec une fréquence principale de 950 Hz – 3000 Hz
- **Flash**
4 lampes LED clignotantes de hautes intensités
Avertissement! Les clignotants peuvent causer des crises épileptiques
- **Coussin Vibrant**
Puissance du vibreur: 2.0 - 4.0 VDC
Émet un son

Communication radio

- | | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| ■ Fréquences | BE1380 | 433.9 MHz |
| | BE1580 | 868.3 MHz |
| | BE1580 - 315 | 314.9 MHz |
| ■ Plage de fonctionnement | BE1380 | 197 pieds, 60 m |
| | BE1580 | 656 pieds, 200 m |
| | BE1580 - 315 | 98 pieds, 30 m |

Ligne de vue dégagée. La couverture est réduite si des murs et des objets de grandes tailles bloquent le signal.

Exigences Environnementales

- Température de fonctionnement: 59° à 95° F (15° à 35° C)
- Humidité relative: 5% à 95% (sans condensation)

Affichage

- Type : Effet «Twisted Nematic» (TN) LCD
- L'intensité du rétroéclairage réglable en 5 étapes
Le rétro-éclairage est activé par le bouton de répétition
- Couleur du rétroéclairage: blanche
- Délai d'affichage: 8 secondes

Alarme et répétition

- Délai de l'alarme : 20 minutes
- Diminution de la répétition intelligente de 9 à 2 minutes en décroissant de deux minutes à la fois

Lampe nocturne de nuit

- Incorpore une lampe nocturne qui guide votre retour au lit avec une douce lumière bleuet
- Type: Lumière Electro-luminescente (EL)
- Activer / Désactiver le bouton de répétition
- Délai d'attente: 1h sur adaptateur, 15 min sur pile

Fonctionnement

- Bouton-poussoir de rotation pour un réglage facile et indépendant de l'heure et l'alarme
- Bouton spécifiquement conçu pour choisir entre un format 12-heures ou 24-heures
- Bouton spécifiquement conçu pour ajuster l'intensité du rétro-éclairage en 5 étapes
- Bouton qui permet d'activer et désactiver la sonnerie de l'alarme et les lumières clignotantes
- Supervision de la pile qui surveille et affiche l'état de la pile de secours
- La pile d'alimentation de secours assure le fonctionnement de l'alarme, le coussin vibrant, les lumières clignotantes et la lampe nocturne.

Dans la boîte


- BE1380 Réveil-Matin
- BE1272 Coussin vibrant avec son
- Adaptateur, 7.5 VDC, 1000 mA
- 4 piles rechargeables AAA NiMH
- Manuel de l'utilisateur

Exigences réglementaires

- Conforme aux exigences suivantes: **WEEE, Der grüne punkt, CE, FCC, RoHS, C-Tick and A-Tick**



Touches et commandes

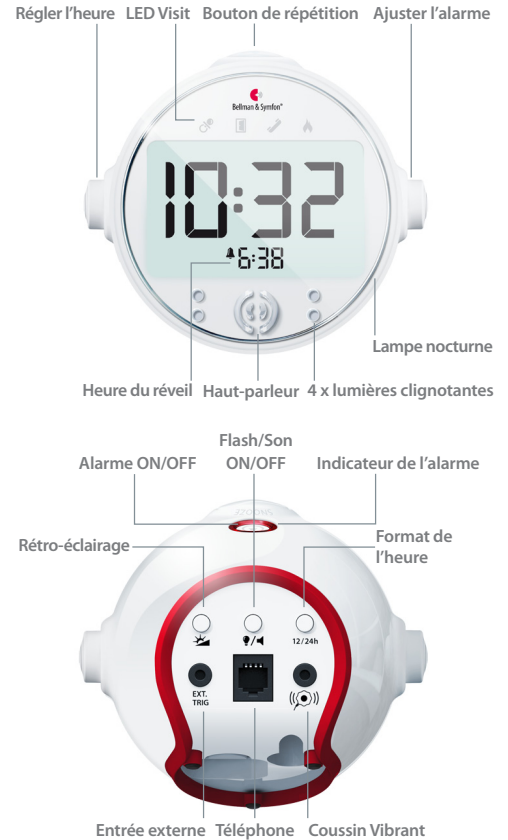

Indicateurs Bellman Visit

Les LED de Visit indique normalement les suivants:

- Le LED orange indiquant le symbole d'une sucette de bébé – L'émetteur Pleurs de bébé est activé
- Le LED vert indiquant le symbole d'une porte ouverte – L'émetteur de porte est activé
- Le LED jaune indiquant le symbole d'un téléphone – L'émetteur du téléphone est activé
- Le LED rouge indiquant le symbole d'un détecteur de fumée – Le détecteur de fumée est activé

Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles:

- BE1271 Coussin vibrant sans son
- BE9086 Câble de sortie externe
- BE9105 Câble de téléphone flexible
- Adaptateur téléphonique compatible avec divers pays

© 2011, Bellman & Symfon AB

Bellman et Bellman & Symfon sont des marques déposées détenue par Bellman & Symfon AB, tous les droits réservés. Tous les concepts des produits sont brevetés. Sujets à des modifications sans préavis.

BE1380_017DAS001_FR

bellman.se/reveil